



## Therapeutische Hygiene Matratze

*Die einfache und kostengünstige Alternative zur Wechseldruckmatratze!*



mit  **Lentex®**  
**Hygiene Technologie**

Unsere **Beste - Antidekubitus** Matratze  
für den Einsatz im Pflegeheim und Krankenhaus.



# air0 Therapeutische Hygiene Matratze

Die air0 wurde als eine therapeutische Ersatz-Matratze für die Behandlung von Druckgeschwüren bis einschließlich Grad 3 entwickelt.

Das spezielle Design und die Zusammensetzung der Schäume in Kombination mit der Lentex® Oberflächenbeschichtung macht die air0 zu einer exzellenten Wahl für die Pflege und auch Liegekomfort des Benutzers.

Scherkräfte werden durch das speziell gestaltete Layout der Matratze minimiert.

## UNSERE EINZIGARTIGE OBERFLÄCHENBESCHICHTUNG MIT LENTEX® TECHNOLOGIE

Unsere Matratzen sind mit der einzigartigen Oberflächenbeschichtung Lentex® ausgestattet. Dabei wird der Lentex® Hygiene Schutzbeschichtung direkt auf den Matratzenkern auflaminiert, d. h. es gibt weder Nähte noch Reißverschlüsse.

Unser Schutzbezug mit der Lentex® Technologie ist absolut flüssigkeits-, viren- und bakterien dicht, sowie beständig gegen Blut, Urin, Salben, Öle und Fette.

Die weiße Farbe des Bezuges fördert die frühe Erkennung von Verschmutzungen auf der Matratzenoberfläche und bietet somit eine zusätzliche Hilfe, bestmögliche Hygiene zu gewährleisten.

Durch einfache Wischdesinfektion kann die Matratze wiederaufbereitet werden.

“Active Membran Technology” sorgt für einen optimalen Luftaustausch.

Für die unvergleichlichen Hygieneigenschaften sowie den hervorragenden Liegekomfort sorgt die Kombination von ausgewählten, hochwertigen Schäumen und der innovativen Lentex® Technologie.

Wenn Sie mehr über Lentex® Technologie erfahren möchten, lesen Sie bitte unser Merkblatt über Lentex®.

Der Lentex® Schutzbezug vermeidet beim Aufstellen des Kopfteiles eine Faltenbildung im Gesäßbereich, d. h. Verminderung von Dekubitusfällen.

Die Lentex® Hygiene Matratze passt sich den Konturen des Körpers punktgenau an und mindert so im Speziellen den Auflagedruck auf Schultern, Gesäß und Ferse.



Bild 1

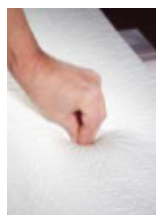


Bild 2

Die air0 Hygiene Matratze ist beidseitig verwendbar.

## FAKTEN

**Artikel-Nr. Größe**  
50970 200 x 90 x 20 cm  
Weitere Größen auf Anfrage.

**Matratzengewicht**  
Ca. 5-9 kg abhängig von Länge, Breite und Dicke.

**Lentex® Garantie**  
5 Jahre auf die Laminierung des Lentex® Bezuges.

**Brandschutz Standard**  
Die Matratze wurde getestet und hält die Anforderungen der SS 876 00 01, Test Methode EN 597-1&2 ein. Entspricht den Anforderungen EN 597-1 und EN 597-2.

**Gewichtsklasse**  
Bis 250 kg, je nach Dicke der Matratze.

**Einsatz**  
Dekubitusprophylaxe und Dekubitusgrad 1-3 nach EPUAP.

**Druckentlastungsklasse**  
Hoch (H).

**Ekettierung**  
Herstellungsdatum, Jahr, Monat, Woche, Pflegeanleitungen, Kontaktinformationen und Positionierung im Bett.



Bitte lesen Sie vor dem ersten Einsatz die Gebrauchsanweisung.



## Vorteile Lentex® Technologie

- Schutzbezug direkt auf Matratzenkern auflaminiert.
- Weder Nähte - noch Reißverschlüsse, optimale Hygieneigenschaften
- Anschaffung sowie Austausch von Schutzbezügen überflüssig, Kostenersparnis.
- Einfache Matratzeninspektion beim Aufbereiten der Lentex® Hygiene Matratze möglich.
- Hervorragender Liegekomfort.
- Optimale Körperanpassung.
- Optimale Gewichtsverteilung, gutes Liegegefühl.
- Körperanpassungsfähigkeit, hervorragende Punktelastizität (s. Bild 2).
- Hohe Druckentlastungswerte.
- Vermeidung Faltenbildung des Bezuges beim Aufstellen des Kopfteiles (s. Bild 1).
- Einfache Reparatur mit Lentex® Reparaturband.



## Vertrieb:

DiKaTec Medizintechnik GmbH & Co. KG  
Industriestraße 7 A, D-97297 Waldbüttelbrunn  
Telefon +49(0)931 32 09 89 24  
Telefax +49(0)931 2 07 06 95  
E-Mail: hygiene@dikatec-medizintechnik.de  
www.dikatec-medizintechnik.de