

# Soft Euroflex

## Hygiene Matratze



mit **Lentex**<sup>®</sup>  
**Hygiene Technologie**

Dekubitus Matratze  
für den Einsatz im Pflegeheim und Krankenhaus.

FUNKTION

STANDARD

PRÄVENTION

THERAPIE



  
**Järven Health Care**

# Soft Euroflex

Die Soft Euroflex Hygienematratze besteht aus 3 Schichten von Schäumen. 2 cm Supersoft Kaltschaum mit einem Raumgewicht von 23 kg/m<sup>3</sup>, 4 cm druckentlastenden Flexschaum mit einem Raumgewicht von 57 kg/m<sup>3</sup> sowie einem 7 cm starken Waterlily-Schaum mit einem Raumgewicht von 53 kg/m<sup>3</sup>.

Die Soft Euroflex ist besonders zur Dekubitusprophylaxe sowie zur Behandlung von Druckgeschwüren der Stufen 1 bis 3 (EPUAP) geeignet. Einsetzbar auch bei Schmerzpatienten.

## UNSERE EINZIGARTIGE OBERFLÄCHENBESCHICHTUNG MIT LENTEX® TECHNOLOGIE

Unsere Matratzen sind mit der einzigartigen Oberflächenbeschichtung Lentex® ausgestattet. Dabei wird der Lentex® Hygiene Schutzbeschichtung direkt auf den Matratzenkern auflaminiert, d. h. es gibt weder Nähte noch Reißverschlüsse.

Unser Schutzbezug mit der Lentex® Technologie ist absolut flüssigkeits-, viren- und bakterien dicht, sowie beständig gegen Blut, Urin, Salben, Öle und Fette.

Die weiße Farbe des Bezuges fördert die frühe Erkennung von Verschmutzungen auf der Matratzenoberfläche und bietet somit eine zusätzliche Hilfe, bestmögliche Hygiene zu gewährleisten.

Durch einfache Wischdesinfektion kann die Matratze wiederaufbereitet werden.

„Active Membran Technology“ sorgt für einen optimalen Luftaustausch.

Für die unvergleichlichen Hygieneigenschaften sowie den hervorragenden Liegekomfort sorgt die Kombination von ausgewählten, hochwertigen Schäumen und der innovativen Lentex® Technologie.

Wenn Sie mehr über Lentex® Technologie erfahren möchten, lesen Sie bitte unser Merkblatt über Lentex®.

Der Lentex® Schutzbezug vermeidet beim Aufstellen des Kopfteiles eine Faltenbildung im Gesäßbereich, d. h. Verminderung von Dekubitusfällen.

Die Lentex® Hygiene Matratze passt sich den Konturen des Körpers punktgenau an und mindert so im Speziellen den Auflagedruck auf Schultern, Gesäß und Ferse.

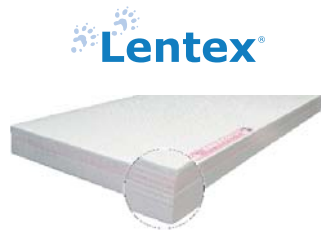


Bild 1



Bild 2

Die Soft Euroflex Hygiene Matratze ist einseitig verwendbar.

## FAKTEN

**Artikel-Nr. Größe**  
50800 190-205 x 90 x 13 cm  
Weitere Größen auf Anfrage.

**Matratzengewicht**  
Ca. 11-13 kg abhängig von Länge.

**Lentex® Garantie**  
5 Jahre auf die Laminierung des Lentex® Bezuges.

**Brandschutz Standard**  
Die Matratze wurde getestet und hält die Anforderungen der SS 876 00 01, Test Methode EN 597-1&2 ein. Entspricht den Anforderungen EN 597-1 und EN 597-2.

**Gewichtsklasse**  
Bis 150 kg.

**Einsatz**  
Dekubitusprophylaxe und Dekubitusgrad 1-3 nach EPUAP.

**Druckentlastungsklasse**  
Hoch (H).

**Ekktierung**  
Herstellungsdatum, Jahr, Monat, Woche, Pflegeanleitungen, Kontaktinformationen und Positionierung im Bett.

Bitte lesen Sie vor dem ersten Einsatz die Gebrauchsanweisung.



## Vorteile Lentex® Technologie

- Schutzbezug direkt auf Matratzenkern auflaminiert.
- Weder Nähte - noch Reißverschlüsse, optimale Hygieneigenschaften
- Anschaffung sowie Austausch von Schutzbezügen überflüssig, Kostenersparnis.
- Einfache Matratzeninspektion beim Aufbereiten der Lentex® Hygiene Matratze möglich.
- Hervorragender Liegekomfort.
- Optimale Körperanpassung.
- Optimale Gewichtsverteilung, gutes Liegegefühl.
- Körperanpassungsfähigkeit, hervorragende Punktlastizität (s. Bild 2).
- Hohe Druckentlastungswerte.
- Vermeidung Faltenbildung des Bezuges beim Aufstellen des Kopfteiles (s. Bild 1).
- Einfache Reparatur mit Lentex® Reparaturband.

## Vertrieb:



DiKaTec Medizintechnik GmbH & Co. KG  
Industriestraße 7 A, D-97297 Waldbüttelbrunn  
Telefon +49(0)931 32 09 89 24  
Telefax +49(0)931 2 07 06 95  
E-Mail: [hygiene@dikatec-medizintechnik.de](mailto:hygiene@dikatec-medizintechnik.de)  
[www.dikatec-medizintechnik.de](http://www.dikatec-medizintechnik.de)