

Waterlily

Hygiene Matratze



mit **Lentex**[®]
Hygiene Technologie

Dekubitus Matratze
für den Einsatz im Pflegeheim und Krankenhaus.



Järven Health Care

Waterlily

Die Waterlily Hygiene Matratze ist aus besonders umweltschonenden Materialien hergestellt, ohne dabei ihre Ansprüche an höchste Hygiene, Brandschutz sowie Haltbarkeit zu verändern. Sie besteht aus einem extra dichten Schaum der höchsten Komfort und lange Haltbarkeit gewährt. Durch ihr hervorragendes Druckentlastungssystem ist sie zur Dekubitusprophylaxe und Therapie einsetzbar.

Die 12 cm hohe Matratze besteht aus einem homogenen Matratzenkern mit einem Raumgewicht von 53 kg/m³. Dekubitus Grad 2.

UNSERE EINZIGARTIGE OBERFLÄCHENBESCHICHTUNG MIT LENTEX® TECHNOLOGIE

Unsere Matratzen sind mit der einzigartigen Oberflächenbeschichtung Lentex® ausgestattet. Dabei wird der Lentex® Hygiene Schutzbeschichtung direkt auf den Matratzenkern auflaminiert, d. h. es gibt weder Nähte noch Reißverschlüsse.

Unser Schutzbezug mit der Lentex® Technologie ist absolut flüssigkeits-, viren- und bakterien dicht, sowie beständig gegen Blut, Urin, Salben, Öle und Fette.

Die weiße Farbe des Bezuges fördert die frühe Erkennung von Verschmutzungen auf der Matratzenoberfläche und bietet somit eine zusätzliche Hilfe, bestmögliche Hygiene zu gewährleisten.

Durch einfache Wischdesinfektion kann die Matratze wiederaufbereitet werden.

„Active Membran Technology“ sorgt für einen optimalen Luftaustausch.

Für die unvergleichlichen Hygieneigenschaften sowie den hervorragenden Liegekomfort sorgt die Kombination von ausgewählten, hochwertigen Schäumen und der innovativen Lentex® Technologie.

Wenn Sie mehr über Lentex® Technologie erfahren möchten, lesen Sie bitte unser Merkblatt über Lentex®.

Der Lentex® Schutzbezug vermeidet beim Aufstellen des Kopfteiles eine Faltenbildung im Gesäßbereich, d. h. Verminderung von Dekubitusfällen.

Die Lentex® Hygiene Matratze passt sich den Konturen des Körpers punktgenau an und mindert so im Speziellen den Auflagedruck auf Schultern, Gesäß und Ferse.

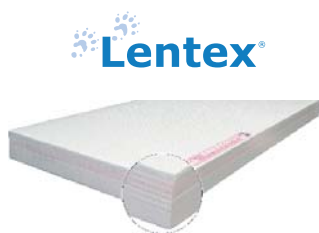


Bild 1



Bild 2

Die Waterlily Hygiene Matratze ist beidseitig verwendbar.

FAKTEN

Artikel-Nr. Größe

5002 190-205 x 90 x 12 cm
Weitere Größen auf Anfrage.

Matratzengewicht

Ca. 12-13 kg abhängig von Länge.

Lentex® Garantie

5 Jahre auf die Laminierung des Lentex® Bezuges.

Brandschutz Standard

Die Matratze wurde getestet und hält die Anforderungen der SS 876 00 01, Test Methode EN 597-1&2 ein. Entspricht den Anforderungen EN 597-1 und EN 597-2.

Gewichtsklasse

Bis 150 kg.

Einsatz

Dekubitusprophylaxe und Dekubitusgrad 2 nach EPUAP.

Druckentlastungsklasse

Hoch (H).

Ekktierung

Herstellungsdatum, Jahr, Monat, Woche, Pflegeanleitungen, Kontaktinformationen und Positionierung im Bett.



Bitte lesen Sie vor dem ersten Einsatz die Gebrauchsanweisung.



Vorteile Lentex® Technologie

- Schutzbezug direkt auf Matratzenkern auflaminiert.
- Weder Nähte - noch Reißverschlüsse, optimale Hygieneigenschaften
- Anschaffung sowie Austausch von Schutzbezügen überflüssig, Kostenersparnis.
- Einfache Matratzeninspektion beim Aufbereiten der Lentex® Hygiene Matratze möglich.
- Hervorragender Liegekomfort.
- Optimale Körperanpassung.
- Optimale Gewichtsverteilung, gutes Liegegefühl.
- Körperanpassungsfähigkeit, hervorragende Punktlastizität (s. Bild 2).
- Hohe Druckentlastungswerte.
- Vermeidung Faltenbildung des Bezuges beim Aufstellen des Kopfteiles (s. Bild 1).
- Einfache Reparatur mit Lentex® Reparaturband.

Vertrieb:



DiKaTec Medizintechnik GmbH & Co. KG
Industriestraße 7 A, D-97297 Waldbüttelbrunn
Telefon +49(0)931 32 09 89 24
Telefax +49(0)931 2 07 06 95
E-Mail: hygiene@dikatec-medizintechnik.de
www.dikatec-medizintechnik.de